



Welch Allyn Système de dépistage visuel Spot™



Photoréfracteur portable et simple à utiliser qui identifie avec précision les erreurs de réfraction et le mauvais alignement oculaire chez les enfants et les adultes.



WelchAllyn®

Le système de dépistage visuel Spot Vision Screener est un outil d'examen précis et économique destiné aux professionnels de la vue.

« J'apprécie le système Spot. Je l'emporte d'un bureau à l'autre et je l'utilise sur de nombreux patients chaque jour. Il est très rapide et facile à utiliser... C'est un outil précieux. »

Dr Bill Kegerize, Optométriste, Genoa Family Eye Care, Oregon, OH



Le système de dépistage visuel Spot Vision Screener contribue à relever les défis des pratiques actuelles en matière de soins ophtalmologiques...

Répondre à la **demande croissante** d'une population vieillissante

Maintenir le flux de pratique lors du traitement de patients présentant **une mobilité réduite et des handicaps**

Traiter **davantage de patients en demande**, dans certains cas **avec moins de spécialistes des soins ophtalmologiques**

Offrir des soins plus différenciés dans un secteur hautement réglementé et concurrentiel

...grâce à une solution intelligente qui vous aide à optimiser votre flux de travail !



Outil idéal pour les examens oculaires de base



Aucune dilatation des yeux requise




Facile à utiliser, formation minimale requise



Dépistage des patients en quelques secondes, et ce n'importe où

Cliniquement prouvé comme étant d'une grande précision

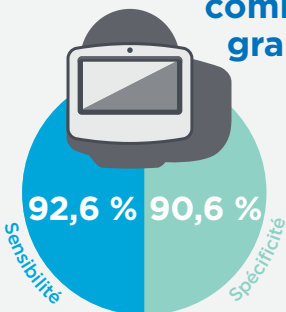

Une étude clinique a démontré que le système de dépistage visuel Spot Vision Screener disposait d'une sensibilité de 92,6 % et d'une spécificité de 90,6 %.¹

Cliniquement prouvé comme ayant un taux de réussite élevé



Il a été démontré que le système de dépistage visuel Spot Vision Screener avait un taux de réussite élevé, avec une capture des mesures réussie dans 97 % des cas.²

Expérimentez la différence

Spot Vision Screener

Dépistage visuel rapide et efficace, en quelques secondes seulement.



Capacités

- Idéal pour les enfants à partir de 6 mois, les adultes avec de petites pupilles, les patients muets, et les patients handicapés
- Dépistage des patients de tous âges sans dilatation
- Mesure des pupilles jusqu'à 4 mm



Meilleure expérience de dépistage

- Technologie de capture automatique pour des résultats instantanés
- Instructions intuitives à l'écran permettant de guider l'utilisateur tout au long du processus
- Écran tactile facile à utiliser
- Portable, pour être emporté partout où vous allez



Polyvalence

- Gamme d'équivalence sphérique mesurant +/- 7,50D
- Réfraction monoculaire ou binoculaire (axes SE, DS, DC)
- Option pour convention +/- cyl
- Lectures binoculaires simultanées en une seule opération
- Dépistage automatisé grâce à des résultats complets, objectifs et faciles à interpréter



Résultats complets et cohérents

- Rapide et non invasif
- Affichage des résultats des deux yeux en quelques secondes
- Capture des mesures réussie dans 97 % des cas²
- Impression des résultats sur un ordinateur de bureau ou une imprimante d'étiquettes grâce à une connexion WiFi®
- Résultats envoyés directement dans le dossier patient à l'aide de la connectivité



Le système de dépistage visuel Spot Vision Screener peut vous aider à gagner un temps précieux et améliorer les soins aux patients au quotidien.

Le système de dépistage visuel Spot Vision Screener peut détecter les affections suivantes :

Myopie
Myopie


Hypermétropie
Presbytie

Anisométrie
Pouvoir réfractif inégal

Astigmatisme
Vision floue, problème de structure oculaire

Strabisme
Mauvais alignement des yeux

Anisocorie
Taille inégale de via pupille

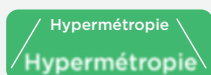


Astigmatisme




Exportation facile des données pour une documentation et des soins aux patients améliorés



Port USB

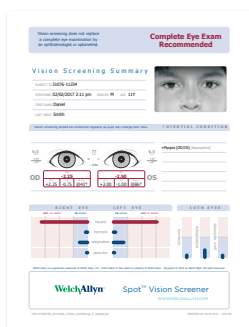

Compte-rendu patient personnalisé

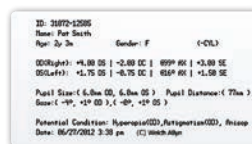

Compte-rendu sous forme d'étiquette imprimée



Possibilité d'envoyer les résultats directement dans le dossier patient

Informations de commande :

VS100-2	Système de dépistage visuel Spot Vision Screener, alimentation électrique et cordon UE, dragonne
VS100-4	Système de dépistage visuel Spot Vision Screener, alimentation électrique et cordon RU, dragonne
VS100S-2	Système de dépistage visuel Spot Vision Screener, alimentation électrique et cordon UE, dragonne et sacoche de transport
VS100S-4	Système de dépistage visuel Spot Vision Screener, alimentation électrique et cordon RU, dragonne et sacoche de transport

ACCESSOIRES

10644	Sacoche de transport pour système de dépistage visuel Spot Vision Screener
--------------	--

Sources :

1. Evaluation of the Spot Vision Screener in young children in Costa Rica. J AAPOS, 2015 Oct;19(5):441-4. doi: 10.1016/j.jaapos.2015.08.002
2. Accuracy of the Spot and Plusoptix photoscreeners for detection of astigmatism; 2015, Mabel Crescioni, JD, DrPH, Joseph M. Miller, MD, MPH, and Erin M. Harvey, PhD

Pour plus d'informations sur les moyens d'améliorer les résultats des patients et de préserver la vision des enfants et des adultes, contactez votre représentant local Welch Allyn ou votre distributeur. En savoir plus sur emeai.welchallyn.com



Microsite
Spot Vision



WelchAllyn

Hill-Rom

©2018 WELCH ALLYN, INC. TOUS DROITS RÉSERVÉS. DOC. N° : SM4193-FR-HOS-R1 MC15452 2019-03

Le système de dépistage visuel Spot Vision Screener est conçu pour produire des images optiques pouvant aider à dépister les erreurs de réfraction et les mauvais alignements oculaires en détectant les reflets cornéens spéciaux de chaque œil lors du dépistage. Le système de dépistage visuel Spot Vision Screener évalue ces reflets cornéens de la rétine pour estimer l'erreur de réfraction. Il estime également la taille de la pupille, la distance de la pupille et la déviation du regard. Il est destiné à être utilisé chez des sujets âgés de six mois à l'âge adulte. Dispositif médical (93/42/EEC) : Classe I(m). Fabricant : Welch Allyn, Inc., 4341 State Street Road, Skaneateles Falls, NY 13153 USA. Rep. CE : Welch Allyn Limited, Navan Business Park, Dublin Road, Navan, County Meath, Irlande. Cet appareil médical est un produit de santé réglementé qui, conformément à ladite réglementation, porte un marquage CE. Welch Allyn recommande de lire attentivement les instructions détaillées relatives à l'utilisation adéquate et en toute sécurité des appareils qui se trouvent dans les documents accompagnant les appareils médicaux. Le personnel des établissements de santé est responsable du bon usage et de l'entretien de ces appareils médicaux. Welch Allyn se réserve le droit d'apporter des modifications à la conception, aux caractéristiques et aux modèles, sans préavis. La seule garantie consentie par Welch Allyn est la garantie écrite sur la vente de ses produits.