



Welch Allyn ProBP™ 2000 digital blodtrykksenhet




Rask, nøyaktig og enkel automatisk blodtrykksavlesning



WelchAllyn®

Welch Allyn ProBP 2000 er den **IDEELLE BLODTRYKKS**LØSNINGEN

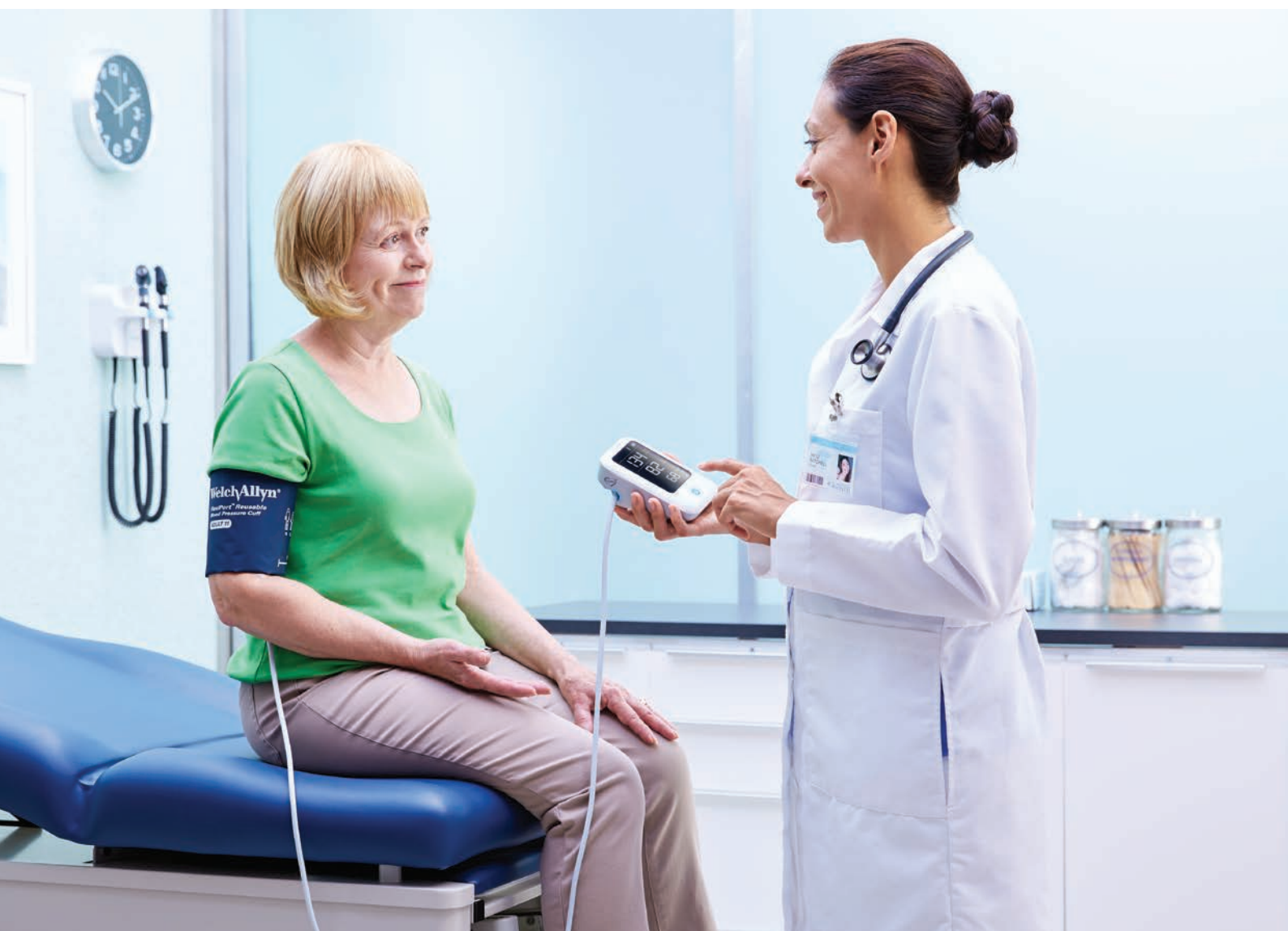

NØYAKTIGHET



PÅLITELIGHET



HASTIGHET

Når du trenger en klinisk digital blodtrykksenhet, kan **nøyaktighet** og **pålitelighet** være det du trenger aller mest. Welch Allyn har utviklet den nye ProBP 2000 digitale blodtrykksenheten, med teknologi som vil gi deg trygge resultater.

Vi har kombinert to av våre nyskapende teknologier for å forbedre undersøkelser for deg og dine pasienter.

Welch Allyn SureBP®-teknologi

Vår oppblåsningsbaserte SureBP-algoritme brukes på alle Welch Allyn-enheter for vitale tegn, og hjelper helsepersonell i enhver pleiesituasjon med å registrere blodtrykkverdier raskt og automatisk med høy presisjon.

- Blodtrykkverdier er enklere å registrere ved oppblåsning. Det tar ca. 20 sekunder
- Oppfyller kravene i henhold til AAMI-standardene for Blodtrykksnøyaktighet
- Ettrykksknapp utløser enheten for å starte registreringen når mansjettten blåses opp
- 97 % fullføring når det er oppstått bevegelse¹



“SureBP-teknologi gir store fordeler innen hastighet og pasientkomfort. Helsepersonell kan føle seg enda tryggere på denne nye teknologien?”

Dr. Bruce S. Alpert | Universitetet i Tennessee,
AAMI Sphygmomanometer Committee Chair

Welch Allyn FlexiPort® blodtrykksmansjett teknologi

Bruk av den riktige mansjettstørrelsen er en viktig faktor for å få nøyaktige målinger. Welch Allyn FlexiPort-mansjetter leveres i en rekke størrelser for å kunne passe til et større utvalg av din pasientpopulasjon. De bidrar til å sikre at riktig mansjettstørrelse brukes hver gang, noe som gir større nøyaktighet.

- Unik «snap-fit»-ettpunktskobling som eliminerer arbeidet med tradisjonelle koblinger og gir bedre arbeidsflyt
- ProBP 2000 er kompatibel med FlexiPort-mansjetter for flergangsbruk fra barnestørrelse opp til stor voksen og lår (15–55 cm-serien)
- Når de kombineres med SureBP-teknologi, bidrar mansjettene til å registrere avlesninger ved oppblåsning etter omtrent 20 sekunder¹



 WELCH ALLYN
FlexiPort® Reusable
BLODTRYKSMANSJETTER



Produktspesifikasjoner for ProBP 2000 digital blodtrykksenhet

| | |
|--------------------------|--|
| Eksterne mål | Bredde: 94 mm (3,70 tommer) Lengde: 142 mm (5,59 tommer) Høyde: 66 mm (2,59 tommer) |
| Vekt | 283 g (0,62 pund) uten batterier |
| Skjerm | Digital LCD V.A. 68 x 90 mm, trykk og puls vises |
| Strømalternativer | 4 alkaliske AA-batterier, 6 V DC (inkludert) AC-strømforsyning (107041) Inndata: 100-240 V, 50-60 Hz, 400 mA Utdata: 6 V, 1 |
| Metode | Oscillometrisk |
| Måleområde | Nominelt mansjettrykk: 0-299 mmHg (0-40 kPa) Måletrykk: Systolisk: 50-260 mmHg Diastolisk: 25-220 mmHg Puls: 40-199 slag/minutt |
| Nøyaktighet | Trykk: ±0,4 kPa (3 mmHg) Pulsverdi: ±4 % |

Deler & Tilbehør*

KONFIGURASJONER

- 2000** ProBP 2000 digital blodtrykksenhet, størrelse 11 voksen FlexiPort gjenbrukbar BP-mansjett, 4 AA-batterier
2000-P ProBP 2000 digital blodtrykksenhet, størrelse 11 voksen FlexiPort gjenbrukbar BP-mansjett, 4 AA-batterier og strømforsyning

TILBEHØR

107041 Strømforsyning (inkludert adapter for USA, EU, Storbritannia og Australia)

FLEXIPORT BLODTRYKKMANSJETTER

- REUSE-09** barn (15-21 cm)
REUSE-10 liten voksen (20-26 cm)
REUSE-11 voksen (25-34 cm)
REUSE-11L voksen lang (25-34 cm)
REUSE-12 stor voksen (32-43 cm)
REUSE-12L stor voksen lang (32-43 cm)
REUSE-13 lår (40-55 cm)

*Ta kontakt med din lokale Welch Allyn-representant for en fullstendig liste over konfigurasjoner og tilbehør som er tilgjengelig i ditt område.

Hvis du vil vite mer, går du til emeai.welchallyn.com. Du kan også ta kontakt med din Welch Allyn-salgsrepresentant.

¹ Welch Allyn Motion Tolerance Clinical Study, august 2016

² Alpert, Bruce S., Clinical evaluation of the Welch Allyn SureBP® algorithm for automated blood pressure measurement. Blood Pressure Monitoring, vol. 12 nr. 4, august 2007.



Welch Allyn EMEAI Customer Care
IDA Business Park - Johnstown
Navan, County Meath, Irland
(Tlf.) +353 46 906 7700
europe@welchallyn.com

EMEAI.WELCHALLYN.COM

WelchAllyn®

Hill-Rom®