



Welch Allyn ProBP™ 2000 digital blodtrycksmätare




Ger dig snabba och korrekta mätningar



WelchAllyn®

Welch Allyn ProBP 2000 **BLODTRYCKSLÖSNING** som passar i alla vårdmiljöer

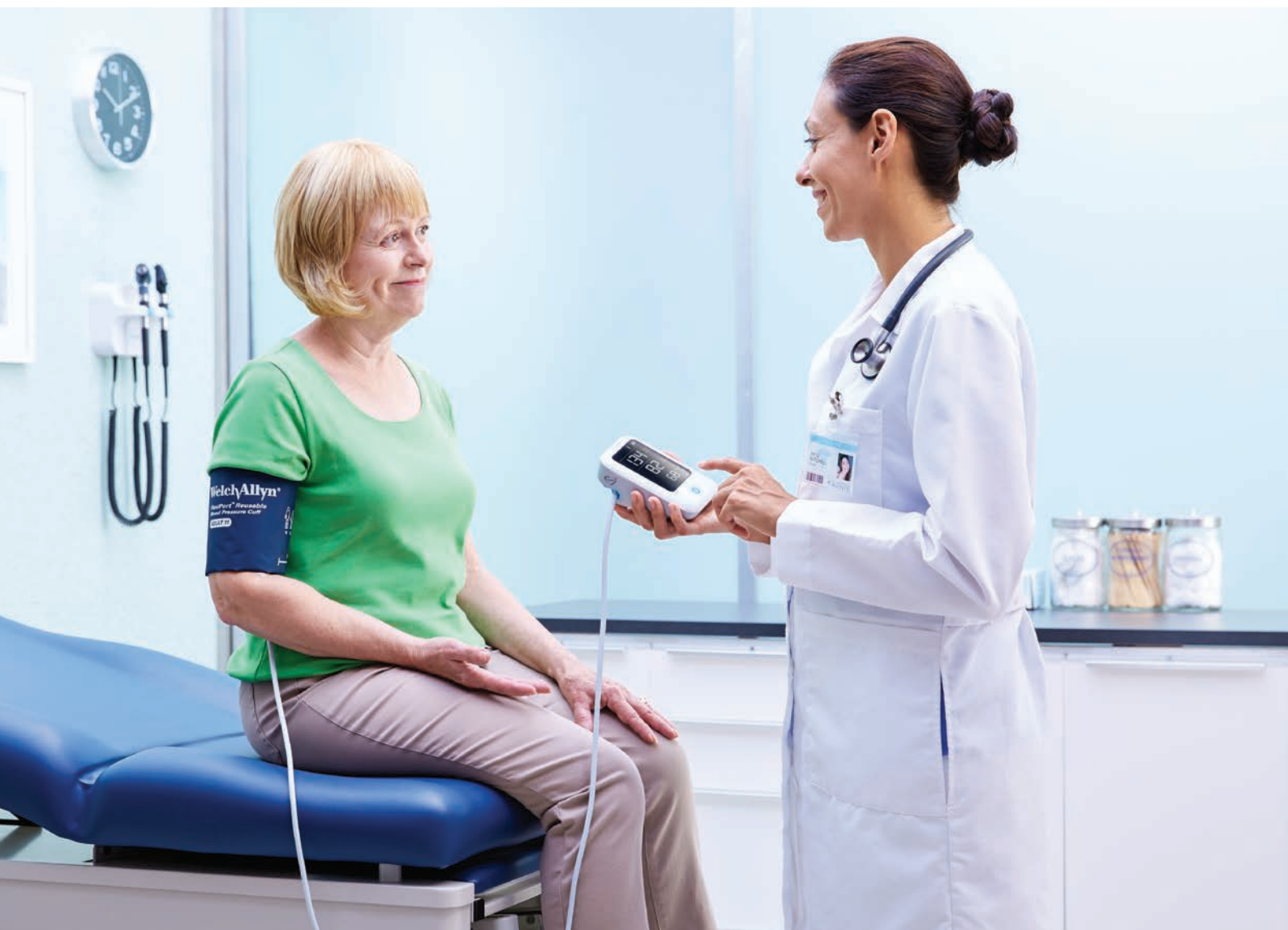

NOGGRANNHET



TILLFÖRLITLIGHET



HASTIGHET

När du letar efter en kliniskt validerad blodtrycksenhet bör du kunna förvänta dig **noggrannhet** och **tillförlitlighet**. Welch Allyn har utformat den nya ProBP 2000 med tekniska funktioner för resultat som du kan lita på.

Vi har kombinerat två av våra tekniker för att förbättra undersökningarna för dig och dina patienter.

Welch Allyn SureBP®-teknik

Vår SureBP-algoritm som baseras på mätning under uppblåsning används på Welch Allyn's enheter för vitala tecken, vilket hjälper läkare i alla typer av vårdmiljöer att utföra automatiserade, snabba och korrekta mätningar av blodtrycket.

- Blodtrycksmätningar som tar cirka 20 sekunder utförs snabbt och bekvämt genom att mätningen görs på uppblåsningen.
- Uppfyller AAMI-standarder för noggrannhet vid blodtrycksmätning
- Enheten aktiveras för mätning med en knapptryckning
- Resultat av kliniska studier visar mindre känslighet för rörelse under mätning (97% tillförlitlighet)¹



“SureBP-tekniken ger stora fördelar vad gäller hastighet och patientkomfort... Sjukvårdspersonal kan lita på den här nya tekniken²”

Dr. Bruce S. Alpert | University of Tennessee,
AAMI Sphygmomanometer Committee Chair

Welch Allyn FlexiPort® blodtrycksmanschett

Det är viktigt att använda rätt manschettstorlek för att få korrekta mätvärden. Welch Allyn FlexiPort-manschetter finns i en mängd olika storlekar för att passa på många olika patienter, vilket hjälper dig att se till att rätt manschettstorlek används varje gång.

- Enkel och snabb enpunktsanslutning gör att du slipper besväret med traditionella manchettslangar och anslutningar vilket passar bättre i ett hektiskt arbetsflöde
- ProBP 2000 är kompatibel med återanvändbara FlexiPort-manschetter, allt från barn upp till stor vuxen och lå (15-55 cm)
- I kombination med SureBP-teknik får du snabba och bekväma mätningar på cirka 20 sekunder¹



 WELCH ALLYN
FlexiPort® flergångs
BLODTRYCKSMANSCHETTER



Produktspecifikationer för ProBP 2000 digital blodtrycksmätare

Yttermått	Bredd: 94 mm Längd: 142 mm Höjd: 66 mm
Vikt	283 g utan batterier
Bildskärm	Digital LCD-VA 68 mm x 90 mm, tryck och puls visas
Strömförsörjningsalternativ	4 alkaliska AA-batterier, 6 V likström (ingår) Nätadapter (107041) Ineffekt: 100–240 V, 50–60 Hz, 400 mA Uteffekt: 6 V, 1
Metod	Oscillometrisk
Mätområde	Angivet manschettryck: 0 mmHg–299 mmHg (0 kPa–40 kPa) Mätningstryck: Systoliskt: 50–260 mmHG Diastoliskt: 25–220 mmHG Puls: 40 till 199 slag/minut
Noggrannhet	Tryck: +/- 0,4 kPa (3 mmHg) Pulsvärde: +/- 4 %

Reservdelar och tillbehör*

KONFIGURATIONER

- 2000** ProBP 2000 digital blodtrycksmätare, FlexiPort blodtrycksmanschett flergångs, storlek 11 – vuxen, 4 AA-batterier
- 2000-P** ProBP 2000 digital blodtrycksmätare, FlexiPort blodtrycksmanschett flergångs, storlek 11 – vuxen, 4 AA-batterier och strömförsörjning

TILLBEHÖR

107041 Strömförsörjning (inklusive nätadapterar)

FLEXI-PORT-BLODTRYCKSMANSCHETTER

REUSE-09 Barn (15–21 cm)
REUSE-10 Vuxen, liten (20–26 cm)
REUSE-11 Vuxen (25–34 cm)
REUSE-11L Vuxen, lång (25–34 cm)

REUSE-12 Vuxen, stor (32–43 cm)
REUSE-12L Vuxen, stor, lång (32–43 cm)
REUSE-13 Lår (40–55 cm)

*Kontakta den lokala Welch Allyn-representanten för en fullständig lista över konfigurationer och tillbehör som finns tillgängliga i din region.

För mer information, besök emeai.welchallyn.com eller kontakta din Welch Allyn-representant.

¹ Welch Allyn Motion Tolerance Clinical Study, augusti 2016

² Alpert, Bruce S., Clinical evaluation of the Welch Allyn SureBP[®] algorithm for automated blood pressure measurement. Blood Pressure Monitoring, Vol. 12 No. 4, augusti 2007.



Welch Allyn
St Eriksgatan 113, 7 tr
113 43 Stockholm
Tel: +46 20 78 10 30
ordernordic@hill-rom.com

WWW.WELCHALLYN.SE

WelchAllyn[®]

Hill-Rom[®]

©2018 WELCH ALLYN, INC. MED ENSAMRÄTT. DOK. NR: SM4185SE REV A MC14918, MAJ 2018.

ProBP 2000 digital blodtrycksenhet är avsedd för att mäta blodtryck och hjärtfrekvens hos barn- och vuxenpatienter. Medicinteknisk produkt (93/42/EEC): Klass IIa. Anmält organ: TÜV Rheinland LGA Products GmbH (CE0197) Tillverkare: Guangdong Transtek Medical Electronics Co., Ltd. No. 105 Dongli Road, Torch Development District, Zhongshan, 528437, Guangdong, Kina. Representant i Europa: MDSS-Medical Device Safety Service GmbH, Schiffgraben 41, 30175 Hannover, Tyskland. Den här medicinska produkten är en reglerad sjukvårdsprodukt som, i enlighet med denna förordning, är försedd med CE-märkning. Welch Allyn rekommenderar att du noggrant läser de detaljerade anvisningarna för säker och korrekt användning som ingår i dokumenten som medföljer de medicintekniska produkterna. Vårdinrättningarnas personal är ansvarig för korrekt användning och underhåll av dessa medicintekniska produkter. Welch Allyn förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande i design, specifikationer och modeller. Den enda garanti Welch Allyn ger är den uttryckliga skriftliga garantin som ges vid försäljning eller uthyring av dess produkter.